



ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ОРИОН®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

## Лазерные терапевтические аппараты

### ОРИОН СТЕП® и ОРИОН ПЛЮС®



**ваш выбор для сохранения здоровья  
всей семьи**

- Почему лазерная терапия подходит практически всем?
- Возможности и преимущества аппаратов ОРИОН СТЕП® и ОРИОН ПЛЮС®
- Какие критерии учитывать при выборе аппарата для домашнего лечения?



ВНПП «ЖИВА»  
**ОРИОН**  
ORION

**ОРИОН®**  
**ОРИОН®**

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»  
Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.  
Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

## СОДЕРЖАНИЕ

Лазерная терапия и что можно лечить аппаратами ОРИОН® .....	4
Лазерный аппарат «ОРИОН СТЕП»® .....	8
Лазерный аппарат «ОРИОН ПЛЮС»® .....	11
Безопасность лазерных аппаратов ОРИОН® .....	19
О процедурах с лазерными аппаратами ОРИОН® .....	21
О стоимости и ценности аппаратов ОРИОН® .....	24





## Какой аппарат выбрать: «ОРИОН СТЕП»® или «ОРИОН ПЛЮС»®

Научно-производственное предприятие «ЖИВА» более 30 лет разрабатывает и производит лазерные аппараты серии ОРИОН® для клинической практики и домашнего применения.

В настоящее время компания выпускает 2 модели аппаратов ОРИОН®: мобильный аппарат «ОРИОН СТЕП»® и многофункциональный комплекс «ОРИОН ПЛЮС»®.

### *Какой лазерный аппарат лучше для лечения дома – «ОРИОН СТЕП»® или «ОРИОН ПЛЮС»®?*

Такой вопрос нам часто задают люди, которые хотят выбрать для себя оптимальный вариант аппарата для решения своих проблем со здоровьем и конечно, чтобы он устроил по цене.

На самом деле сказать, какой аппарат лучше – невозможно. Ведь каждый человек любую вещь выбирает для себя в зависимости от своих потребностей, предпочтений, образа жизни и возможностей.

И среди коллег компании «ЖИВА», есть те, которые предпочитают «ОРИОН СТЕП»®, и те, кто выбрал для себя аппарат «ОРИОН ПЛЮС»®, а есть те, кто приобрел оба аппарата и пользуется ими в зависимости от ситуации.

Для того чтобы помочь в выборе аппарата ОРИОН®, который подходит именно Вам, в этом буклете мы расскажем в чем преимущество каждого аппарата и чем они отличаются, сравним аппараты по эффективности лечения, удобству использования и стоимости.

**Ведь делая такую инвестицию в здоровье, мы все хотим получить максимум возможностей для лечения широкого круга заболеваний и желательно для каждого члена семьи.**

**Первое, на что стоит обратить внимание – и «ОРИОН ПЛЮС»®, и «ОРИОН СТЕП»® - это лазерные терапевтические аппараты, потому, что главный действующий фактор в обоих аппаратах – низкоинтенсивное инфракрасное импульсное лазерное излучение.**

**Отличаются аппараты тем, каким образом и за счет чего осуществляется подход к восстановлению здоровья.**





ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ОРИОН®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://orion.orion.ru)

## Лазерная терапия и что можно лечить аппаратами ОРИОН®



*О лазерной терапии Вы можете узнать из статей на сайте компании «ЖИВА» [www.orion.ru](http://www.orion.ru) или роликов на Ютуб (Youtube).*

*Далее краткое напоминание об основных эффектах лазерной терапии, и перечне заболеваний, которые можно с успехом подлечить, пользуясь аппаратами ОРИОН®.*

*Эту часть буклета можно пропустить, если Вы уже хорошо ориентируетесь в теме.*

Лазерная терапия применяется в клинической практике более 60 лет. За этот период было доказано, что лазерное лечение купирует воспаление, боль, отеки, улучшает кровообращение, питание и регенерацию тканей, повышает уровень потребления кислорода, снижает вязкость крови и риск тромбообразования, активизирует процессы метаболизма, нормализует обмен веществ и нервную проводимость, оказывает антистрессорный эффект.

- Лазерная терапия останавливает прогресс заболевания, запускает механизмы восстановления здоровья, способствует клеточному обновлению и омоложению, повышает энергетический потенциал организма.
- Клинические и научные исследования, проведенные более чем в 20 крупнейших медицинских и научных учреждениях России с предоставлением отчетности доказали, что лечебная эффективность лазерных аппаратов ОРИОН® – по многим заболеваниям достигает 97%.



**ВНПП «ЖИВА»**  
**ОРИОН**  
**ORION**

**ORION®**

**ОРИОН®**

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

## Краткий перечень организаций, где были проведены самые обширные исследования:

- ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России
- ФКУ «Центральный военно-клинический госпиталь Министерства обороны имени П.В. Мандрыка
- Центральный военно-клинический госпиталь Министерства обороны имени А. А. Вишневого (сегодня НМИЦ ВМТ)
- МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского
- Московский медицинский институт имени А.И. Евдокимова
- Институт красоты на Арбате.
- Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России
- Кафедра биофизики Биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
- Институт общей физики Российской академии наук им. Лауреата нобелевской премии А.М. Прохорова
- Институт экологии Российской академии наук им. А.Н. Северцова

## Ни один метод физиотерапии не имеет такой доказательной базы!



Полный перечень медицинских и научных учреждений, клинических исследований, авторов методических рекомендаций, а также список показаний к лечению, который содержит более 200 заболеваний вы сможете увидеть на сайте компании «ЖИВА» [www.orion.su](http://www.orion.su)



**К лечению аппаратами ОРИОН® показано более 200 заболеваний, среди них:**

- **Заболевания суставов и позвоночника:**

деформирующий остеоартроз, артриты, артрозы, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, протрузии, подагра, пяточная шпора, миозит, эпикондилит, бурсит, тендовагинит.

- **Сердечно-сосудистые заболевания:**

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, аритмии, сердечная недостаточность, постинфарктные состояния.

- **Заболевания вен и артерий:**

трофические язвы, сосудистые заболевания нижних конечностей, варикозное расширение вен, атеросклероз, облитерирующий эндартериит, тромбоз, тромбофлебит, аллергические васкулиты, диабетическая ангиопатия ног.

- **Болезни нервной системы:**

головные боли, мигрени, постинсультные состояния, сосудисто-мозговая недостаточность, вертебро-базилярная недостаточность, вегето-сосудистая дистония, неврозы, невриты и невралгии, радикулиты, травматические повреждения нервных окончаний, контрактуры, опоясывающий лишай, нейросенсорная тугоухость.

- **ЛОР- и бронхо-легочные болезни:**

хронический тонзиллит, ОРВИ, ангина, синдром апноэ во сне, отиты, ларингофарингит, гайморит, вазомоторный ринит хронические заболевания легких, бронхиты, бронхиальная астма, пневмонии.

- **Посттравматические осложнения:**

длительно не заживающие, гнойные и послеоперационные раны, пролежни, ожоги, обморожения, переломы костей, вывихи, растяжения, абсцесс, панариций, флегмона.

- **Болезни ЖКТ:**

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинезия желчевыводящих путей, гастриты, гастроэнтероколит, холангиты, панкреатит, гепатит, геморрой, проктит, парапроктит, анальный зуд, трещины заднего прохода.

- **Стоматология:**

пародонтоз, пародонтит, стоматиты, гингивиты, пульпит, альвеолит, периодонтит, периостит, ДВНЧС, подготовка и лечение на всех этапах протезирования, профилактика осложнений.



ВНПП «ЖИВА»  
**ОРИОН**  
ORION

ORION®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

- **Урология и гинекология:**

хронические воспаления придатков матки, эрозии шейки матки, кольпиты, генитальный герпес, цистит, энурез, пиелонефрит, простатит, уретриты, ДГПЖ.

- **Сексуальные расстройства:**

эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция.

- **Дерматология:**

контактные, аллергические и зудящие дерматиты, фурункулез, экземы, псориаз, нейродермит, герпес, фолликулит, панариций.

- **Коррекция косметических недостатков:**

купероз, телеангиэктазии, акне, витилиго, целлюлит, стрии, рубцы, лифтинговые и anti-age процедуры.



**Научные и клинические исследования, многолетняя практика доказали, что лазерные аппараты ОРИОН® отвечают самым высоким требованиям по качеству, безопасности и эффективности. А инновационные технологии, умные алгоритмы, комфорт использования дают основания утверждать, что лечение лазерными аппаратами ОРИОН® является золотым стандартом лазерной терапии.**

Более подробно об этом вы можете узнать из буклета «Лечение аппаратами ОРИОН® – «Золотой стандарт лазерной терапии», ссылка дана в конце буклета.





## Лазерный аппарат «ОРИОН СТЕП»®

### Немного истории.

Аппарат ОРИОН® – это первая инновационная разработка предприятия «ЖИВА». Компания поставила цель разработать мобильный, простой в управлении, надежный, безопасный и доступный по цене лазерный аппарат, который обеспечивает эффективное лечение многих заболеваний **именно в домашних условиях**.

Тогда в начале 90-ых прошлого века, это был поистине революционный шаг, подобного аппарата не было ни у одной компании, а многие врачи вообще не верили в саму возможность. Для реализации такого, можно сказать «безумного» замысла, специалисты предприятия более 2-ух лет проводили технические испытания и клинические исследования в соответствии с государственными стандартами. И вот в 1993г. впервые в истории компания получила разрешение Минздрава РФ на клиническую практику и использование в домашних условиях.

Это был самый **первый лазерный аппарат в мире** для самостоятельного домашнего лечения, и все даже импортные аналоги, появились гораздо позже.

**За изобретение и производство мобильных лазерных аппаратов компания «ЖИВА» получила золотую медаль на выставке Эврика в Брюсселе в 1998г.**

За прошедшие годы на рынок было поставлено 12 модификаций аппарата. Современная версия называется «ОРИОН СТЕП»®. Менялась электронная начинка, дизайн и эргономика аппарата, одно оставалось неизменным – аппарат доказал свою востребованность и эффективность лечения многих заболеваний, он действительно стал «народной маркой».







## Возможности и преимущества аппарата.

Аппарат «ОРИОН СТЕП»® имеет один режим лечения, который «зашит» в его электронной схеме. Это наиболее изученный и многократно клинически проверенный вариант лазерной терапии, который достаточен для поддержания здоровья и лечения многих заболеваний.

Аппарат работает с фиксированной мощностью 8 Вт и частотой модуляции 1500 Гц, время воздействия можно менять от 1 до 5 минут, в соответствии с диагнозом и методикой лечения. Проверить работу лазера с помощью встроенного фотоприемника можно в любое время, когда Вам понадобится.

Аппарат интуитивно понятен буквально «с одного взгляда», его легко использовать самостоятельно. Он прост в управлении, не требует дополнительных настроек - всего три кнопки: включаем питание, устанавливаем время и включаем пуск – все, аппарат работает и можно проводить процедуры. Звуковой сигнал и световая индикация контролируют время проведения процедуры.

«ОРИОН СТЕП»® компактный и очень легкий, его изюминкой является эргономика: поворотный излучатель буквально подстраивается под контуры тела, поэтому воздействие даже на «неудобные» зоны патологии, например на спине, проводить удобно. Такого конструктивного решения больше нет нигде в мире, а компания «ЖИВА» запатентовала промышленный образец.





ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ОРИОН®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

«ОРИОН СТЕП»® работает от встроенного аккумулятора, заряжается как мобильный телефон. Одного заряда хватает на полный курс лечения – до 14 дней.

В комплекте к аппарату 2 насадки: зеркальная и зеркально-магнитная, которые повышают качество процедур. Никаких дополнительных насадок или тем более расходников докупать не нужно.



Аппарат «ОРИОН СТЕП»® легко помещается в рюкзак и даже в дамскую сумочку, его можно всюду брать с собой и проводить процедуры там, где Вам удобно, и в то время, когда Вам нужно. На даче, даже если там вдруг отключат электричество, в автомобильной пробке, в путешествии и в командировке, в спорт зале и на круизном лайнере.

Схемы лечения подробно расписаны в методическом пособии на языке понятном пользователю без медицинского образования. Основное пособие входит в комплект аппарата, есть еще 2 дополнительных: по лечению урологических и ЛОР заболеваний, которые можно докупить по желанию.

В 2022-2023 году в рамках проекта по педиатрии компания выпустила 5 электронных пособий для лечения детей. Проект будет развиваться, следите за нашими публикациями.



## Лазерный аппарат «ОРИОН ПЛЮС»®

### Немного истории.

Известно, что комплексный подход к здоровью человека усиливает терапевтический эффект. Поэтому еще в начале 2000-х целью компании «ЖИВА» стала разработка аппарата с оптимальным набором дополнительных факторов воздействия, для создания более синергичных и действенных методик лечения широкого спектра заболеваний, с наглядным интерфейсом и интеллектуальной системой управления.

В настоящее время компания «ЖИВА» производит 5-ю версию аппарата «ОРИОН ПЛЮС»® – инновационную разработку последнего поколения.

Аппарат имеет оригинальный дизайн, включающий элегантный корпус, стильную панель управления, главное достоинство которой наглядный и интуитивно понятный интерфейс.



Аппарат «ОРИОН ПЛЮС»® – это научные исследования, клиническая практика и новейшие технологии для реализации **принципиально нового подхода к лечению и восстановлению здоровья.**

**Главные преимущества аппарата – индивидуальные программы лечения, умные алгоритмы заботы о своем владельце, возможность адаптации схем лечения в зависимости от возраста, статуса здоровья и даже образа жизни.**





## Научные исследования и клиническая практика.

Научные исследования дали основное направление для разработки перспективных методик лечения, с возможностью адаптации и индивидуализации схем лечения, обосновали выбор параметров процедур.

Низкоинтенсивное лазерное излучение, с его уникальными свойствами и универсальностью дает отличные возможности для восстановления здоровья.

Но, монохроматическое излучение практически не дает возможности для индивидуализации лечения. Можно разработать отличные стандартные схемы лечения, которые помогают во многих случаях, но люди разные, они по-разному болеют и их организмы по-разному восстанавливаются после болезни.



Для усиления адаптивных свойств лазерного луча, его качественного преобразования с целью индивидуализации и повышения эффективности программ лечения специалисты компании увеличили ряд частоты модуляции и добавили цветовую энергию, которые также несут энергию и информацию, не нарушая при этом природу и свойства лазерного луча.

Частотная модуляция задает ритм импульсов лазерного излучения, но не влияет на когерентность и мощность импульса лазерного света, она изменяет только интегральную энергию за время воздействия. И это свойство позволяет





создавать как более щадящие, так и более насыщенные энергетические режимы лечения.

Уникальные эксперименты, проведенные в лаборатории биофизики Российского Научного Центра Медицинской Реабилитации и Курортологии (РНЦ МРиК), под руководством выдающегося ученого с мировым именем, доктора биологических наук Зубковой Светланы Михайловны выявили частоты модуляции, отвечающие резонансам клеточных структур организма, значимые для полноценного восстановления жизнедеятельности клеток, тканей и органов.

Клиническая практика показала, что оптимальные и биологически обоснованные частоты следования импульсов: 1500 Гц, 80 Гц и 5 Гц, установленные в аппарате «ОРИОН ПЛЮС»® способствуют созданию синергичных режимов лечения и этих частот модуляции вполне достаточно для реализации эффективных и безопасных режимов воздействия при разных патологиях, формах течения заболеваний, фазах воспалительных процессов.

В сотрудничестве с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук был выработан качественно новый подход к реализации биорезонансного режима «БИО».

Алгоритм обеспечил генерацию энергии лазера, необходимую для коррекции и наиболее благоприятного действия на биологический процесс в соответствии с частотой модуляции. По сути, был создан умный энергоинформационный алгоритм, имитирующий физиологичный подход к лечению болезней.

**Во время прохождения импульса лазерного излучения клетки получали необходимое количество энергии и информации, а во время отсутствия импульса – их усваивали.**

Частотная модуляция режима «БИО» задает ритм импульсов лазерного излучения, синхронный биологическим процессам организма, регулирует энергетическую дозу, полученную пациентом за процедуру, а также «отвечает» за правильность полученных информационных сигналов от здоровых клеток к поврежденным, способствуя как их восстановлению, так и утилизации отживших клеток, улучшая обмен веществ и положительно влияя на процессы метаболизма.

Внедренческое научно-производственное предприятие «ЖИВА» закономерно может гордиться созданием режима частотной модуляции «БИО», который был запатентован совместно с доктором наук Зубковой С.М., автором разработки частотного ряда.

**Уникальный режим частотной модуляции «БИО», которого нет ни у одного другого аппарата физиотерапии, стал одним из значимых достижений Научно-производственного предприятия «ЖИВА».**



Для выбора цветового воздействия с целью лечения, реабилитации, профилактики и превентивных технологий компания «ЖИВА» провела основательные научные исследования совместно с учеными кафедры биофизики биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под руководством профессора, доктора биологических наук Максимов Георгий Владимировича.

В результате было доказано, что излучение лазера и цветная энергия светодиодов, **не оказывали отрицательного влияния** на показатели крови и функциональное состояние животного, а также был выбран действительно значимый цветной спектр и выявлены основные эффекты сочетанного воздействия.

- **Синий свет** в сочетании с лазерным излучением в начальной фазе заболевания уменьшает острую фазу воспаления, отеки и зуд, усиливает местный клеточный иммунитет, обладает обезболивающим и бактериостатическим действием, ускоряя качественное заживление ран, снижает неврологические и стрессовые проявления.
- Модуляция лазерного луча **красным светом** эффективна в стадии выздоровления, стихания воспаления, для активизации метаболизма и регенерации тканей, замедления дегенеративных процессов, повышения тонуса сосудов и энергетики организма, усиления гемодинамики и насыщения крови кислородом. В острой стадии воспаления, при сильных болях, аллергических проявлениях – красный свет противопоказан.
- Непрерывное **ИК излучение** ближнего диапазона спектра сочетаясь с лазерным светом, усиливает кровоснабжение, способствует обезболиванию, рассасывающему и антистрессорному эффектам, применяется при облучении внутренних органов (печень, желчный пузырь, кишечник), а также суставов и позвоночника.

В комплект поставки к аппарату «ОРИОН ПЛЮС»® входят **5 великолепно отработанных методических пособий**, составленных ведущими специалистами России на основе длительной клинической практики.

Пособия включают методики лечения самого большого перечня заболеваний, методики постоянно обновляются с учетом современных знаний в медицине.



ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ORION®  
ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВПП «ЖИВА»  
Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.  
Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

Авторское пособие по косметологии, дерматологии и anti-age процедурам разработано совместно со специалистами Института красоты на Арбате. В нем даны превентивные методики омоложения и замедления процессов старения, которые позволяют быть в тонусе, сохранять молодость и красоту, не прибегая к агрессивным процедурам и пластическим операциям.

В пособии есть методики лечения многих заболеваний кожи, включая аллергические проявления, псориаз, витилиго и экзему. Издание эффектно оформлено авторскими изображениями. Пособие не входит в комплект поставки, но его можно купить отдельно.



*«В нашей практике мы применяем лазерные аппараты «ОРИОН ПЛЮС». В нем все продумано до мелочей. Оптимальный набор хорошо изученных частот модуляции, простая регулировка мощности лазерного, ИК и цветового излучения, ничего лишнего, перегружающего работу врача. Наглядный интерфейс не требует специального обучения для персонала, наличие 2-ух излучателей четко разделяет тип излучения и облегчает проведение процедур».*

**Кубалова Марина Николаевна,**  
врач высшей квалификации, кандидат медицинских наук



## Возможности и преимущества аппарата.

Лазерный аппарат «ОРИОН ПЛЮС»® позволяет получить высокие терапевтические результаты и создавать индивидуальные программы лечения.

Главное преимущество аппарата – возможность адаптации схем лечения в зависимости от заболевания, его длительности и тяжести течения, от возраста и общего статуса здоровья.



Частота модуляции изменяет энергетическую дозу воздействия для разных по насыщенности энергией процедур. Подключение цветной энергии гармонизирует воздействие на организм, улучшает качество лазерного луча, усиливает терапевтические эффекты. Регулировка мощности лазерного и ИК излучения нужна для более щадящих и вместе с тем эффективных схем лечения.

А умный энергоинформационный алгоритм биорезонансного режима «БИО», имитирующий физиологичный подход к лечению болезней, дает необходимую коррекцию биологических процессов для восстановления здоровья.

Интеллектуальная система управления аппарата буквально заботится о своих пользователях, облегчая проведение процедур и принимая на себя рутинные операции благодаря умным алгоритмам: запоминание установленных параметров, отслеживание хода процедуры, распознавание излучателей, контроль излучения лазеров и светодиодов и помощь при ошибочных действиях.





ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ОРИОН®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

Пользоваться аппаратом «ОРИОН ПЛЮС»® не сложно, комфортно и даже приятно. Наглядный интерфейс сразу дает интуитивное понимание, как установить нужный режим терапии в соответствии с методикой лечения.

Аппарат «ОРИОН ПЛЮС»® обеспечивает **полноценную заботу о здоровье каждого члена семьи** – настоящий лечебный комплекс, буквально кабинет физиотерапии у Вас дома.



Еще одной существенной особенностью аппарата «ОРИОН ПЛЮС»® является наличие двух излучателей: квантового и лазерного, позволяя четко разделять тип излучения, что важно для лечения конкретного заболевания. Для процедуры выбирают излучатель, который указан в методике лечения, облегчая проведение процедур и для медсестер и для самих пациентов.

Излучатели легкие, их комфортно держать, рука не устает во время процедуры. На корпусе излучателя есть кнопка запуска и остановки процедуры, как и на блоке управления, ей удобно пользоваться.

В центре квантового излучателя расположен лазер, излучающий в импульсном режиме на длине волны 905 нм. Лазер окружен цветными светодиодами непрерывного излучения: синий, красный и ИК свет. В квантовый излучатель встроена зеркально-магнитная насадка 50 мТл. Сочетанные воздействия дают возможность адаптации и индивидуализации процедур, повышают качество лечения и ускоряют выздоровление.



ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ОРИОН®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

Пользуясь лазерным излучателем аппарата «ОРИОН ПЛЮС»®, можно воспроизвести все методики, которые разработаны для аппарата «ОРИОН СТЕП»®, **включая пособия для лечения детей.**



Действующий фактор лазерного излучателя – исключительно лазерное воздействие. Его конструкция оптимальна для использования оптических насадок, необходимых для качественного облучения патологического очага через естественные полости организма. Насадки повышают эффективность и комфорт проведения процедур.

Оптические насадки, поставляемые компанией, включают световод и оптические элементы, необходимые для подводки излучения к зоне воздействия. Без них насадка становится просто колбой из оргстекла и скорее ухудшает эффекты терапии. Оптические насадки в комплект поставки не входят, подбираются индивидуально, их можно без проблем приобрести за дополнительную плату.

Аппарат стационарный настольный, работает от электросети. Благодаря современному дизайну прекрасно впишется в любой интерьер и не займет много места.

Подробная инструкция по эксплуатации и технические характеристики аппарата «ОРИОН ПЛЮС»® даны в его паспорте. Паспорт – это не просто технический документ – это отличный навигатор, дающий возможность легко получить нужную информацию.



Дизайнеры позаботились об организации информации, чтобы быстро найти необходимый раздел, и о наглядности описания режимов, снабдив брошюру достаточным количеством иллюстраций, и о простоте изложения информации. После изучения паспорта у наших пользователей практически не возникает вопросов, как обращаться с аппаратом.

### **Безопасность лазерных аппаратов ОРИОН®**

Важный вопрос, который волнует абсолютно всех, кто выбирает аппарат для домашнего лечения. Может ли человек навредить себе, проводя процедуры дома, без наблюдения врача?

#### **С лазерными аппаратами ОРИОН® это исключено!**

Оба аппарата – и «ОРИОН ПЛЮС»® и «ОРИОН СТЕП»® относятся к первому – наивысшему классу лазерной безопасности. Это значит, что лазерное излучение аппаратов ОРИОН® не наносит никакого повреждающего действия ни для глаз, ни для кожи или слизистой. Для проведения процедур не нужны защитные очки.

Максимальная мощность лазера в аппаратах до 10 Вт. Такая мощность не может принести организму никакого вреда или спровоцировать ожог, в отличие от аппаратов с большей мощностью, что подтверждено нормами государственных стандартов.







ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ОРИОН®


ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

- ИК излучение лазерных аппаратов ОРИОН® имеет импульсный характер и в силу сверх короткой длительности импульса 100нс вообще не дает теплового эффекта, и при мощности импульса до 12 Вт в соответствии с СанПин № 5804-91 не оказывает никакого повреждающего действия на глаза, кожу и слизистые оболочки.
- При более высокой интенсивности нужны специальные защитные очки для глаз. Для лазерных аппаратов ОРИОН® защитные очки не нужны!

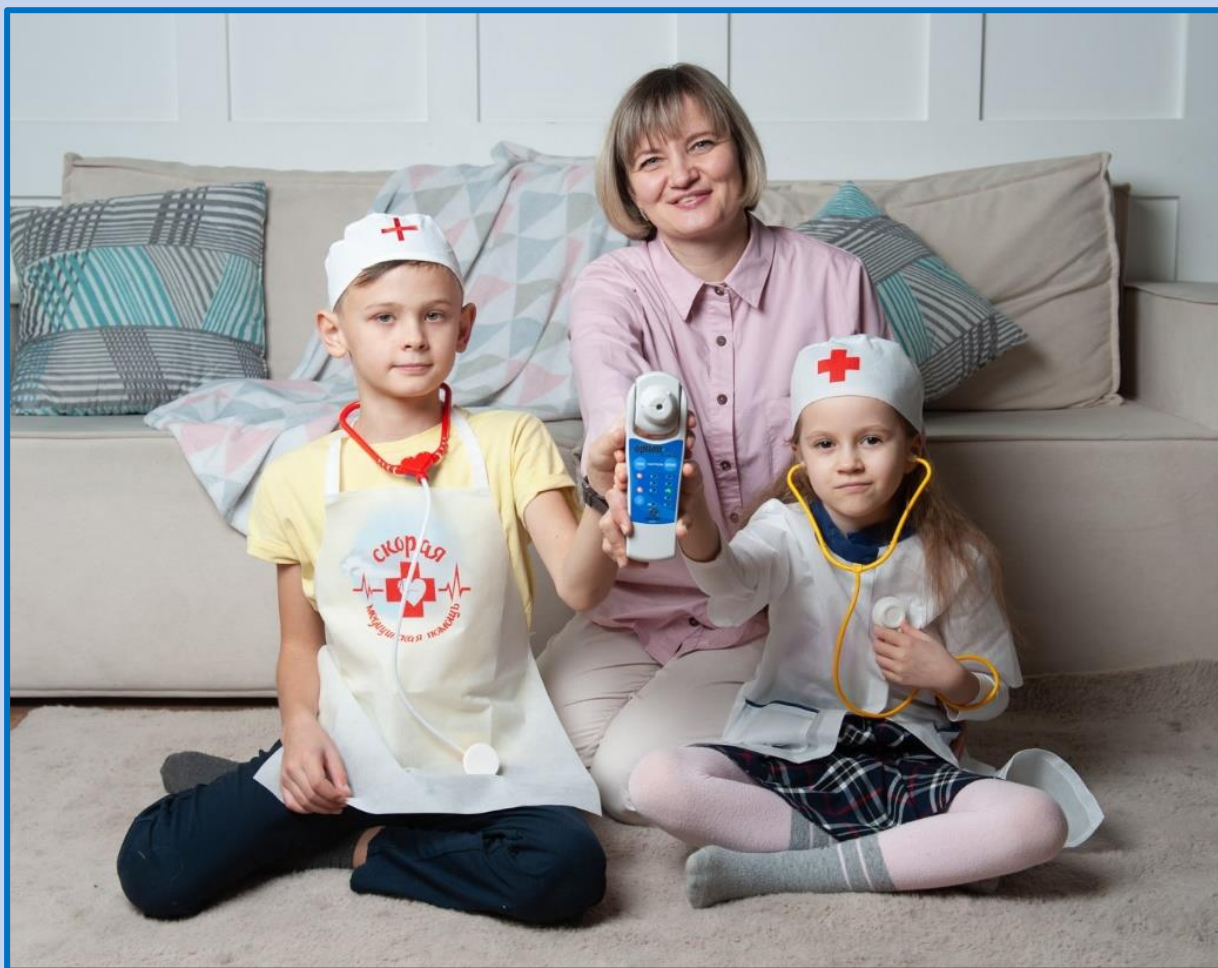

Аппараты серии ОРИОН® имеют регистрационное удостоверение, свидетельствующее о безопасности, надежности и эффективности, а также официальное разрешение Минздрава РФ на клиническую практику и применение в домашних условиях.

В паспорте каждого аппарата приведен перечень актуальной разрешительной документации, подтверждающий соответствие характеристик и параметров аппарата государственным стандартам. Испытания проведены в аккредитованных лабораториях и подтверждены официальными протоколами.

Гарантия на аппараты серии ОРИОН® от 3 до 5 лет, а прослужат Вам более 10 лет.





## О процедурах с лазерными аппаратами ОРИОН®

- Лазер работает с проблемами здоровья прицельно, доставляя максимум необходимой энергии именно в те области патологии, которые нуждаются в коррекции.
- Инфракрасный лазерный свет активизирует клеточный и гуморальный иммунитет, мобилизует защитное действие иммунных клеток, снимает боль, отеки и воспаление.
- Курс лазерных процедур способствует иммунологически завершеному выздоровлению, снижает риски осложнений и рецидивов.
- Процедуры безопасны, полностью соответствуют главному принципу медицины «не навреди», и эффективны на 78% -97%.
- Нет никаких побочных эффектов, осложнений, отсроченных негативных последствий.
- Процедуры стерильны, абсолютно безболезненны, комфортны и приятны.



- Процедуры не требуют много времени, в среднем 10-15 минут. Такое время легко найдет для себя любой человек, тем более что даже из дома выходить не надо.



- Процедуры идеальны для работающих, занятых и публичных людей, позволяя не замедлять привычный ритм социальной активности.
- Видимый результат появляется уже после первого курса процедур, а при регулярной профилактике и применении превентивных методик будет более стойким.
- В домашних условиях процедуры для детей до 1 года проводят под наблюдением и по рекомендации врача, а от одного года – можно проводить самостоятельно, других возрастных ограничений нет.



- Лазерная терапия обладает накопительным эффектом, длительно сохраняя эффект оздоровления.
- Вы получаете многократную пользу: организм качественно восстанавливается, обновляется и омолаживается, а Вы получаете удовольствие.
- Домашние процедуры можно делать в любое время суток, месяца и года.
- Процедуры не требуют специальных навыков и отлично совместимы с любыми лечебными мерами.
- Лазерная терапия являются отличным дополнением к медикаментозному лечению, она эффективно нивелирует побочные действия препаратов, одновременно усиливая их лечебное действие.



ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ORION®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

## **Лазер ОРИОН® – это домашний доктор и скорая помощь в одном аппарате!**

В современной жизни для человека намного важнее не перманентное лечение заболеваний, уже поселившихся в организме, а регулярная профилактика и превентивные меры сохранения здоровья и качества жизни.

Поэтому жизненно важными становятся средства, позволяющие не допускать болезни в свой организм, грамотно поддерживать ресурсы организма для длительной плодотворной жизни.

Воздействие лазерного света универсально. Попадая на любой участок тела, он оказывает опосредованное оздоровление всего организма, благодаря оптимальному распределению лучистой энергии в организме.



Имея дома лазерный аппарат из серии ОРИОН®, можно эффективно помочь себе и своим близким на всех этапах терапии: лечении, реабилитации и профилактики без лишней суеты, без потери времени и денег, в комфортной обстановке и с гарантией благоприятного прогноза.





## О стоимости и ценности аппаратов ОРИОН®

В современных условиях невозможно установить одну единственную цену раз и навсегда. К достоинству компании – цены мы стараемся держать «до последнего». Но все дороже стоит комплектация, услуги партнеров по производственному процессу, по обслуживанию оборудования, продвижению и конечно коммуналка.

**Покупка аппарата для домашнего лечения – это инвестиция в здоровье на долгие годы.**

И здесь имеет значение не только цена аппарата, но и его ценность для Вас лично.



### Определите для себя:

- Что важнее для Вас: мобильность или возможность адаптации процедур?
- Вы планируете лечиться сами или аппарат нужен для всей семьи?
- Часто ли Вы путешествуете, и будете ли брать аппарат с собой?
- Что Вам больше подходит – простота управления или интеллектуальная система с умными алгоритмами заботы о Вас?
- Сколько средств Вы готовы потратить на покупку аппарата?



### Что мы покупаем, приобретая аппарат «ОРИОН СТЕП»®:

- Мобильность и простота использования дает нам возможность лечиться в любое удобное время и в любом удобном месте, и делать это легко и просто. Ведь аппарат очень легкий, компактный и работает от встроенного аккумулятора.
- Схемы лечения стандартны, но они изучены досконально, активно применяются в клинической практике, и достаточно эффективны.
- Цена аппарата уже много лет держит первенство за звание «народного аппарата» по сравнению с другими лазерными терапевтическими аппаратами на рынке. Многие наши покупатели считают стоимость аппарата «ОРИОН СТЕП»® вполне приемлемой.



### Что нам предоставит аппарат «ОРИОН ПЛЮС»®:

- Сильное преимущество аппарата «ОРИОН ПЛЮС»® - интеллектуальные алгоритмы, которые отслеживают и облегчают проведение процедур, помогают создавать индивидуальные программы и персональные интерфейсы здоровья.
- Гибкая система изменения параметров процедур позволяет легко адаптировать базовые схемы лечения для конкретного человека, с учетом его статуса здоровья, возраста и образа жизни, оперативно менять сочетание и силу воздействий в процессе восстановления здоровья.



ВНПП «ЖИВА»  
**ОРИОН**  
ORION

**ORION**®

**ОРИОН**®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](http://ORION/ORION)

- Качественное улучшение энергии монохроматического луча лазера путем сочетания с цветовым излучением дает возможность естественного и гармоничного воздействия.
- В аппарате установлены клинически подтвержденные и научно обоснованные частоты модуляции, отвечающие резонансам клеточных структур, уникальный режим «БИО».
- Умные алгоритмы буквально заботятся о Вас, позволяя создавать хорошо контролируемые процессы лечения и поддержания здоровья, максимально индивидуальные схемы лечения.
- Четкая регулировка, выбор и контроль параметров облучения стали основой для эффективного лечения, не давая лишней нагрузки на организм.



### **Индивидуальные программы терапии помогут:**

- существенно сократить сроки лечения,
- продлить периоды ремиссии для хронических болезней,
- улучшить адаптационные способности организма,
- повысить уровень и качество здоровья человека,
- продлить активное долголетие.





## Что в целом можно получить, приобретая любой аппарат из серии ОРИОН®:

Защиту своего здоровья, большую уверенность в завтрашнем дне, знание, что помощь придет вовремя, а болезнь не разгуляется и не задавит осложнениями.

Мы можем меньше беспокоиться о здоровье и самочувствии родителей, быть более спокойными за детей, зная, что дети станут меньше болеть, а сами мы можем быстрее решать свои проблемы – при внезапном насморке и головной боли, при первом признаке тяжести в ногах или боли в спине, еще до первого хруста в суставах.

А если Вы и Ваши родные всегда в строю, значит, нет проблем с больничным на работе, ребенок не отстанет от учебной программы в школе, а бабушка или дед будут в хорошем настроении, и с удовольствием проведут время с внуками.

Аппараты серии ОРИОН® могут обеспечить качественное лечение всей семьи даже там, где медицинскую помощь неудачно оптимизировали. Мы уверены, процедуры с аппаратами ОРИОН® войдут в повседневную жизнь, помогая рационально организовать заботу о здоровье, улучшить внешний вид и настроение, повысить качество жизни.

### По всем вопросам обращайтесь по бесплатному номеру 8(800) 505-20-25

Бесплатные полноценные консультации специалистов компании «ЖИВА» помогут разобраться с любыми вопросами, которые возникают в процессе лечения.

Мы постарались максимально подробно представить каждый аппарат, его преимущества и возможности. Выбор за Вами!



**И будьте здоровы с лазером ОРИОН®!**



ВНПП «ЖИВА»  
ОРИОН  
ORION

ORION®

ОРИОН®

«ОРИОН» - СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ». ООО ВНПП «ЖИВА»

Консультации 8 (800) 505-2025 бесплатные звонки по России.

Интернет-магазин производителя [ОРИОН/ORION](https://orion.su)

## Дополнительная информация

★ Ваш промокод **ВЫБОР** на скидку 1000 рублей при покупке любого аппарата ОРИОН на сайте компании ООО ВНПП «ЖИВА» <https://orion.su>

Лазерные аппараты ОРИОН® [https://orion.su/blog/device\\_selection/lazernye-apparaty-orion-dlya-lecheniya-doma/](https://orion.su/blog/device_selection/lazernye-apparaty-orion-dlya-lecheniya-doma/)

Экспертные статьи «Все о лазерной терапии и аппаратах ОРИОН®»  
<https://orion.su/blog/about-therapy/>



<https://www.youtube.com/channel/UCkQ8X-QcOeFLAEtj0X6ZJEA>



<https://vk.com/orionsu>



<https://ok.ru/orionsu>



СДЕЛАНО  
В МОСКВЕ

<https://сделановмоскве.рф/brand-card/orion-321>

Узнать подробнее об аппарате «ОРИОН ПЛЮС»®, научных исследованиях и клинической практике, о возможностях умных алгоритмов и интеллектуальной системы управления, использовании аппарата и оптических насадках:

- ✓ Купить аппарат «ОРИОН ПЛЮС»® <https://orion.su/catalog/orion-plus/>
- ✓ Буклет «Лазерный аппарат «ОРИОН ПЛЮС»® – 30 лет науки и инноваций»  
[https://orion.su/blog/device\\_selection/apparat-orion-plyus-luchshie-dostizheniya-fizioterapii-v-odnom-apparate/](https://orion.su/blog/device_selection/apparat-orion-plyus-luchshie-dostizheniya-fizioterapii-v-odnom-apparate/)
- ✓ Видео «Лазерный терапевтический аппарат ОРИОН ПЛЮС – 30 лет науки и инноваций» <https://www.youtube.com/watch?v=zSdeHDxdJQ4&t=209s>
- ✓ Видео «Инструкция по применению лазерного аппарата «ОРИОН ПЛЮС»®»  
<https://www.youtube.com/watch?v=ZJfOmVr4amE>
- ✓ Видео «Оптические насадки для аппарата «ОРИОН ПЛЮС»®»  
<https://www.youtube.com/watch?v=8Zr4fpdN5Hg>

Узнать подробнее об аппарате «ОРИОН СТЕП»®, его возможностях и применении:

- ✓ Купить аппарат «ОРИОН СТЕП»® <https://orion.su/catalog/orion-step/>
- ✓ Видео «Лазер ОРИОН СТЕП. Все самое важное - в одном видео»  
<https://www.youtube.com/watch?v=x2ITeg0Bl4Q>